


CAMPANA ENDURE



DESCRIPCIÓN

Campana de extracción de gases con guillotina de marco perimetral de acero inoxidable T 304, Cal 18 vidrio inastillable de 6 mm de espesor y sistemas de contrabalance con dos opciones: mediante una cadena con eslabones y mediante un cable de acero y polea, ambas con un contrapeso por medio de barras de acero con interior de fibra de vidrio; El material con la que está construida es: Cubierta de acero inoxidable tipo 304, cal. 18, acabado de pulido No. 4 mate, sin bastidor de madera, con refuerzos soldados de acero galvanizado cal. 18, recubiertos con un sellador a base de resinas y hules sintéticos bajo la superficie. Los gabinetes están fabricados en lámina de acero galvanizado y fosfatizado calibre 20, acabado en pintura a base de resina epóxica y polyester en polvo de aplicación electrostática y horneada con jaladeras embutidas de polipropileno, frentes de puertas y cajones remetidos al cuerpo del gabinete mediante un marco perimetral de 3/4 de pulgada, cuenta con sistema bypass conformado por rejillas en el panel superior.

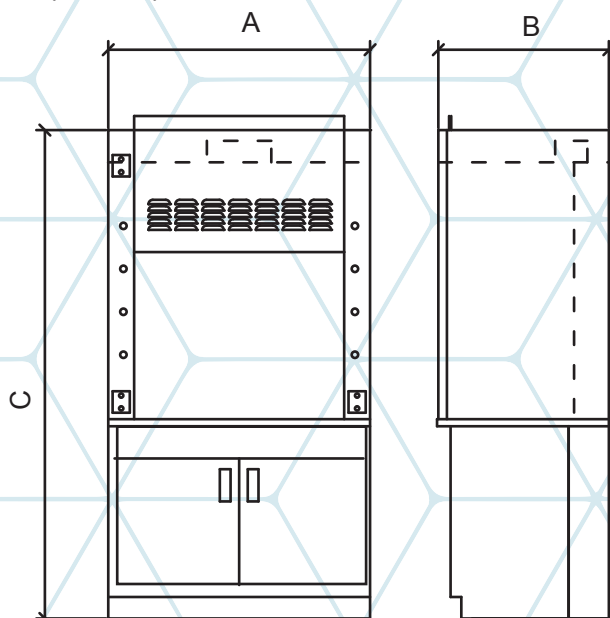

CAMPANAS DE EXTRACCION TRADICIONALES			
UNIDADES EXPRESADAS EN PULGADAS			
TIPO	A	B	C
CAMPANA	48"	31-1/4"	89 1/2"
	60"	31-1/4"	89 1/2"
	72"	31-1/4"	89 1/2"